

Composer votre solution sans fil radio c'est simple...



Choisissez vos émetteurs, choisissez vos récepteurs, et c'est parti !

- Nous livrons nos kits prêts à l'emploi selon vos besoins
- Vous pouvez aussi les configurer ou modifier vous-même.

Associer un émetteur à un récepteur c'est facile !

Appuyez sur le bouton d'apprentissage
Sur un récepteur



*Le récepteur de votre choix.



Puis appuyez sur le bouton
D'un émetteur



*L'émetteur de votre choix.



Utilisez votre système !



*Une notice est fournie avec chaque produit

Points communs des produits :

- **Portée radio +/- 50 mètres** (50 m. en intérieur, 150 m. en extérieur)
- **Possibilité de doubler la portée** grâce à des répéteurs (jusqu'à 3 répéteurs cascables)



Exemple de composition classique

Le kit radio pour appel malades

COMPOSITION :


- 1 émetteur au choix (*médaille, handicap, etc....*)
- 1 Récepteur STL07 *intégré à un manipulateur au choix.*
- Le manipulateur ou la poire de votre choix.

UTILISATION :

- Connectez le manipulateur sur la prise appel-malades.
- Déclenchez l'appel grâce à la poire ou l'émetteur choisi .

LIVRAISON:

- Manipulateur radio préprogrammé.
- Emetteur(s) associé(s).
- Notices.
- Prêt à l'emploi

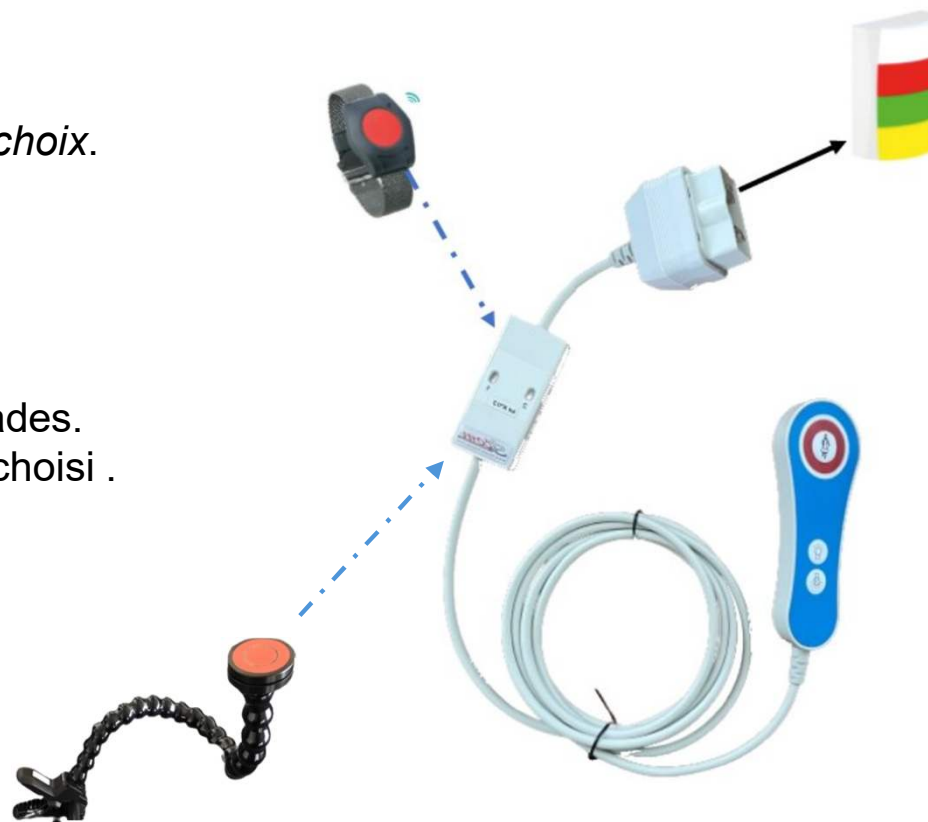

Exemple de composition classique

Les systèmes autonomes :

COMPOSITION :

- Des émetteurs au choix (*médaille, handicap, etc....*)
- Des récepteurs ST-PAGER. (*Bipeur*)
- D'autres récepteurs

Exemple
* Emetteur universel
Avec entrée jack




Récepteurs sonores et lumineux.
Associé à 1 ou plusieurs émetteurs



ST-PAGER : Sonne / vibre et
affiche un message différent pour chaque émetteur
(Jusqu'à 64 émetteurs)

*Solutions configurées sur demande.
ou par vous-même par simple apprentissage .*

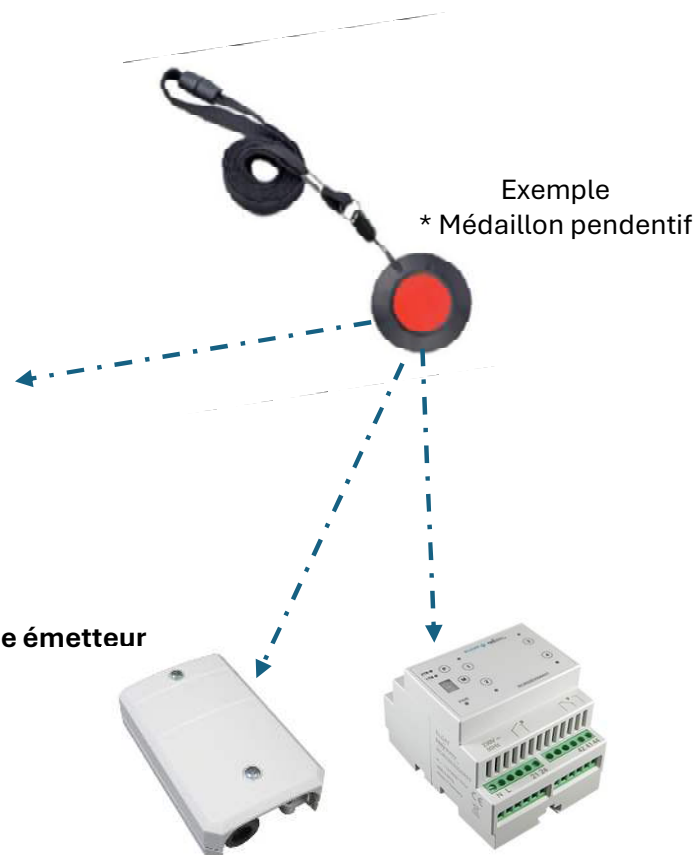

Exemple
* Médaille pendentif

Récepteurs à sortie contact
(différentes versions)
Associés à 1 ou plusieurs récepteurs

Composer votre solution sans fil radio c'est simple...



Augmenter la portée de votre système :

**(Les récepteurs reçoivent l'appel en direct et via un répéteur suivant sa position !)*

1 répéteur unique.



2 à 3 répéteurs.



2 versions au choix:




Répéteur déplaçable.
version prise 220V



Répéteur fixe.
version encastrable en pot rond 220V

Commander nos récepteurs radio avec une Téléthèse infrarouge c'est presque aussi simple...

Grace à notre convertisseur IR vers RADIO

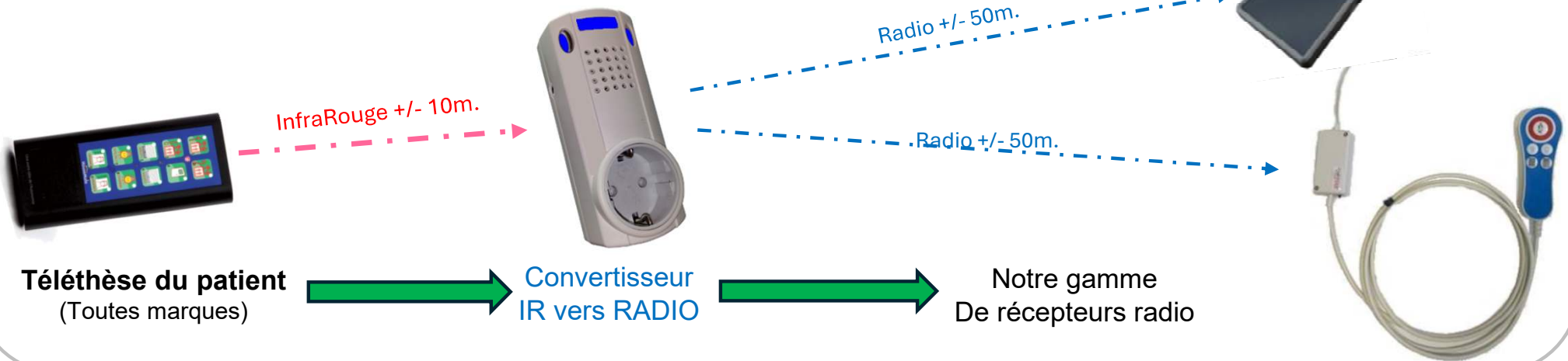

**2 versions
de convertisseurs
IR vers Radio**



Convertisseur.
version prise gigogne



Convertisseur.
Version USB

Télécommande d'apprentissage:

- Cette télécommande contient tous les codes infrarouges acceptés par les convertisseurs.
- Il suffit d'enregistrer les codes IR de celle-ci et de l'affecter à une touche de **vo**tre téléthèse.
- 1 seule télécommande suffit pour tous les convertisseurs du site!

