



Catalogue
HANDICAP
Édition 06 / 2026



STCOM
www.stcom-france.com
info@stcom.fr +33 (0)3.88.68.31.49

A PROPOS DE NOUS

25 ans d'expérience et plus de 1000 clients dans le domaine des établissements de soins.

Gamme appel malades: Produits d'origine, mais aussi toute une gamme de produits compatibles au meilleur rapport qualité /prix.

Notre Gamme Handicap,

Panel complet de solutions dédiées aux patients souffrant de handicaps, adaptés **sur mesure** pour vos systèmes d'appel malades.

Nos points forts :

- Produits conçus pour être **robustes, durables et réparables**, garantis 2 ans.
- **Technologie Plug & Play** : directement branché sur votre système actuel (toutes les prises et toutes marques.*)
- **Voyant d'appel** et même buzzer sur certaines références intégré pour rassurer le patient . (Adapté aux mal voyants ou mal entendants)
 - Technologie **Multi-Systèmes** pour utiliser un même dispositif sur plusieurs systèmes différents.
- **Développement de solutions sur mesure** si aucun produit ne correspond à un besoin spécifique.

Comment configurer VOTRE SOLUTION prête à l'emploi ?

1. Choisissez le contacteur handicap adapté au besoin, filaire ou radio (*à partir de la page 7*)
2. La fiche ou type de connexion appel malades que vous souhaitez (*page*)
3. Le type de connexion (fiche appel malade intégrée, multi-système, prolongateur etc...). (*page 5 & 6*)



www.stcom-france.com



MARQUES & SYSTEMES : Toutes les fiches appel malades. *page 4*

CONNEXION APPEL MALADE : Nos différentes options de connexion *page 5 à 7*

CONTACTEURS HANDICAP

Gamme Bras Premium *page 8 à 12*
Gamme Souffle, Pneumatique & Voix *page 13 à 16*
Contacteurs spéciaux *page 17 à 19*
Contacteurs classiques *page 20 à 22*
Accessoires *page 23 à 24*

RADIO

⇒ Le kit radio appel malades *page 26*
⇒ Contacteurs, émetteurs et médaillons radio *page 27 à 28*
⇒ Récepteurs radio. *page 29*
⇒ Valise de secours appel malades *page 30*
⇒ Répéteurs permettant de doubler la portée. *page 31*

INFRAROUGE

Convertisseur infrarouge en radio *page 31 à 34*
Récepteur infrarouges

EPILEPSIE, CHUTE et ERRANCE

Détection de crises d'épilepsie *page 34 à 36*
Détection de chute et d'errance

PSYCHIATRIE

Solutions pour patients sous contention *page 37*

Principales marques & fiches d'appel malades

ACKERMANN clino



Auto-Ejectable
Double RJ45



Mini-Ejectable
Simple RJ45



Fiche DIN
7/10 broches



Nouvelle
Fiche Magnétique



Fiche Hirschmann
6 ou 10 broches

Tunstall



Magnétique

DB13



ascom



TéléCare Ejectable



Telligence Magnétique

ZETTLER tyco



Sub D15

EZ CARE



EZ CARE
Magnétique

televic



Axio XT
magnétique



Axio
DB 9



AQURA
Magnétique



DIN 7

legrand



Bipolaire



Magnétique
078281



Magnétique
078282
078283

CRMS



Magnétique



Jack 6,35mm



RJ9 / RJ11

Autres marques



TLV
Preject



ST-MAG
Magnétique

Autres marques :

- Nous consulter !

*** Pour les produits non listés : Consultez-nous !**

CONNEXION APPEL MALADE

OPTION 1 : CONNECTIQUE UNIVERSELLE MULTI SYSTEMES

Notre nouveau standard pour connecter nos solution handicap sur tous vos systèmes d'appel malade.

Version prolongateur

Multi Systèmes DIN 8 vers fiche appel malades.

Pré câblé pour No et NF, voyants d'appel et alimentation des contacteurs électroniques ou radio



Version Manipulateurs :

- Compatible ou d'origine
- Avec entrée DiN8 Multi Systèmes

Permet de conserver les commandes domotiques

Le voyant d'appel de la poire

Connexion de tout contacteur en version Multi-Systèmes



OPTION 2 : Fiche appel malade ou jack intégrée

Choisissez votre contacteur et votre modèle de fiche : Votre produit est prêt à être utilisé !

- Réduit les points de connexion, et donc une meilleure fiabilité
- Permet l'intégration du voyant de tranquillisation (sur certains produits)
- **RAPPEL** : Le voyant d'appel n'est pas disponible sur fiche jack 3.5 mm

Fiche appel malade intégré



ZOOM SUR LA VERSION « MULTI-SYSTEMES »

Fiches DIN8 verrouillables pour éviter les débranchements.

Notre nouveau standard pour connecter nos solution handicap sur tous vos systèmes d'appel malade.

Choisissez VOTRE contacteur pour le connecter sur plusieurs systèmes D'appels ,
Ou simplement pour avoir une connectique robuste et durable

- ⇒ Choisissez un de nos contacteurs en version DIN8 MULTISYSTEME.
- ⇒ Choisissez votre prolongateur UNIVERSEL DIN8 femelle vers la ou les fiches appel malades de vos différents systèmes.
- ⇒ Permetts l'intégration du voyant de tranquillisation !

	MULTI SYSTEME	Jack 3.5mm
Utilisable sur plusieurs systèmes	OUI	?
Voyant d'appel intégré	OUI	NON
Contact NO et NF simultané	OUI	NON
Connexion verrouillable sécurisée	OUI	NON
Connectique robuste	OUI	NON

NOUVEAU

Changez uniquement de prolongateur pour connecter sur un autre système !

Avantages :

- Connecteurs ultra résistants à la casse..
- Fiabilité des connexions par bagues à visser (mâle/femelle)
- Précâblage standard NO & NF en fonction de vos systèmes d'appel.
- Précâblage des fils d'alimentations pour contacteurs électroniques ou radio.
- Précâblage pour les voyants 'appel intégrés aux contacteurs..



Connecteur Multi Systèmes
DIN 8 haute qualité

Connecteur jack 3.5mm



CONNEXION APPEL MALADE

OPTION 3 : Connexion par fiche jack sur manipulateur, prolongateur ou interface radio

Nos solutions de connexion pour votre contacteur fiche jack pour le brancher sur votre système !

SUR MANIPULATEUR UNIVERSEL :

Livraison d'un manipulateur avec prise jack intégré pour brancher votre contacteur.

- Utilisation simultanée des commandes manipulateur (appel, lumières et volets) et du contacteur handicap.
- Voyant visible sur la poire d'appel
- **Pas de voyant sur le contacteur !**
- Intégration possible convertisseur NO/NF
- Compatible sur la majorité des systèmes



Manipulateur universel avec prise jack

SUR PROLONGATEUR JACK :

- Prolongateur Jack 3,5 mm mâle/femelle : Longueur sur mesure, connecteur haut de gamme ou remplacement de cordons standard par des haute résistance.
- Prolongateur Jack 3,5mm femelle vers fiche appel malade : Permet d'utiliser un contacteur standard sur un appel malade.

Exemple: Prolongateur fiche jack 3.5mm femelle vers fiche TELEVIC Aqura



SUR MANIPULATEUR D'ORIGINE* :

**Si incompatibilité avec un manipulateur universel*

Intégration d'une fiche jack pour contacteur sur manipulateur d'origine

(les commandes d'appel, lumières et volets d'origine restent opérationnels!)

Les systèmes concernés:

- Ackermann magnétique
- Télévic Aqura
- autres.. (nous contacter)

Manipulateur d'origine avec prise jack



SUR INTERFACE RADIO (ST-TX-1) :

- L'émetteur ST-TX-1 se connecte sur un récepteur radio (en option).
- Permet de convertir un contacteur filaire en version « sans fil »
- Compatible avec toute la gamme radio ST HANDICAP

Ajoutez une fonction sans fil à votre contacteur en le connectant sur votre système en radio !



GAMME ST-BRAS PREMIUM

Contacteurs surs bras articulés



ST-2-BRAS



ST-PROX-BRAS



Hydra-Call

Caractéristiques communes :

Bras 100 cm

- Fixation tête de lit
- Activation par la tête
- Facile à bascule du lit au fauteuil

Bras 60 cm

- Fixation barrière ou au fauteuil
- Activation par un membre



VOYANT D'APPEL

Le voyant de tranquillisation est intégré sur tous nos bras



ROTULE 90°

Permettant le positionnement optimal du contacteur



FLEXIBLE ACIER

Libre passage interne du cordon, nettoyage optimal et durabilité du produit



PINCE ÉTAU ROBUSTE

En aluminium
Fixation sur tube ou plat
Ecartement jusqu'à 55 mm

Toute notre gamme de bras premium exclusive ST HANDICAP est disponible :

*Dans nos deux longueurs de 60cm et de 100cm.**


En version Multi-Systèmes, cordon appel malades ou fiche jack 3.5 mm

(sauf Hydra Call)*

Compatible avec :         



Pour patients ayant peu de force.
(Pression 25 grammes seulement.)
Activation essentiellement à la tête

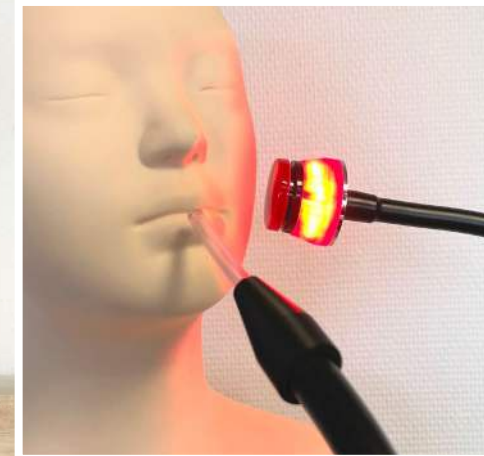

Pour des patients ayant besoin d'une
solution d'hydratation et d'appel
Solution innovante 2 en 1

Mini contacteur

Ø 32 mm
Pression 100 grammes

Ref :ST-1-BRAS

Déclenchement par bouton
Pression de 100 grammes
Voyant d'appel rouge



Contacteur UNIVERSEL & POLYVALENT

Ø 65 mm
Pression 150 grammes

Ref :ST-2-BRAS

Déclenchement par bouton
Pression de 150 grammes
Voyant d'appel rouge

BEST
SELLER

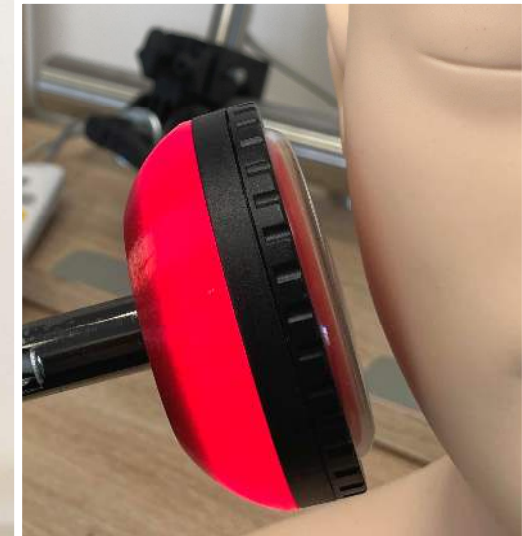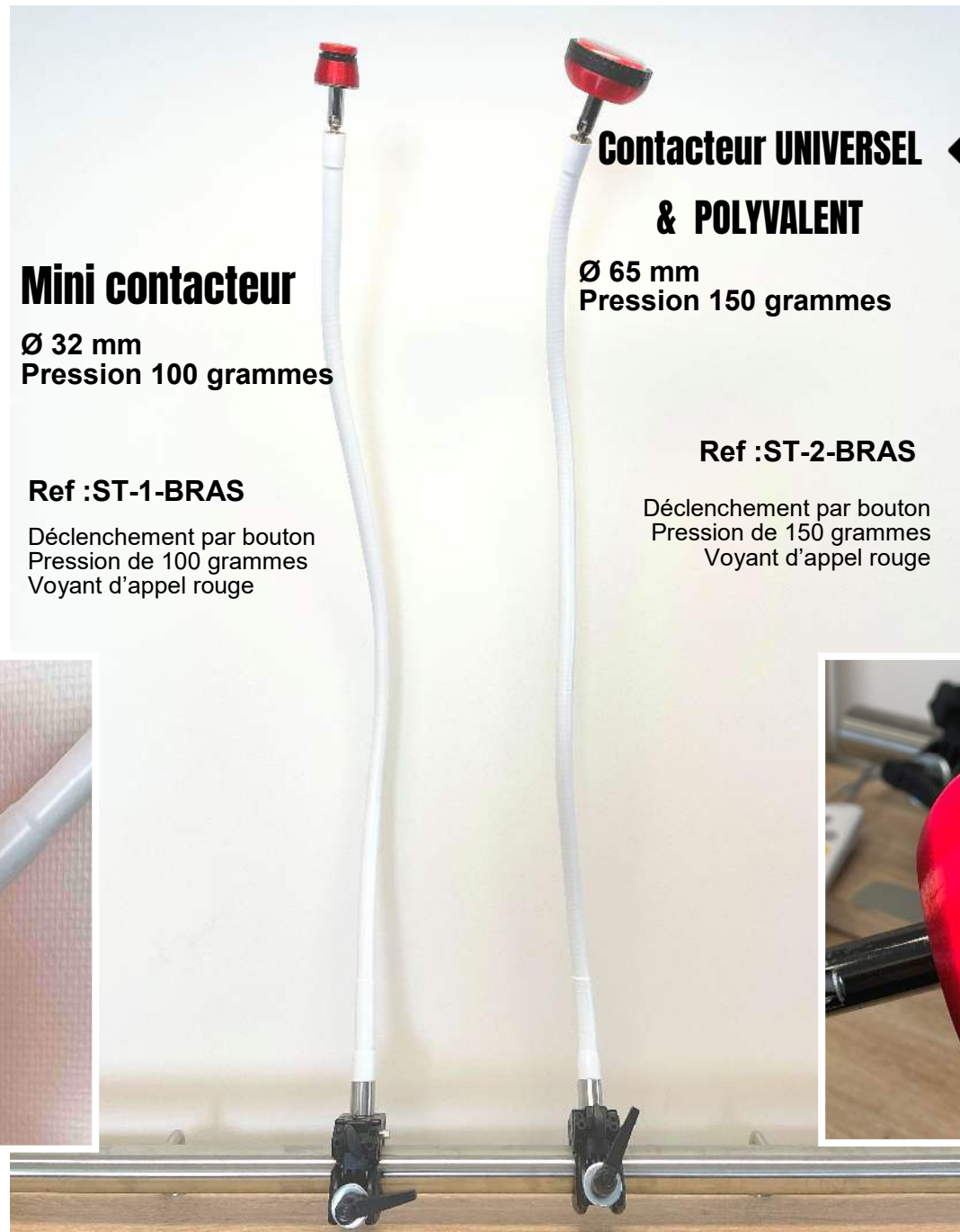

Détection de PROXIMITÉ

Ø 26 mm
Pression 0 Grammes

Ref :PROX-BRAS



Déclenchement par proximité (rapprochement)

Voyant d'appel rouge
Voyant localisation orange permanent
Buzzer à l'activation

Déclenchement par proximité à +/- 2 cm
pour patients avec un peu de mobilité, sans force

EFFLEUREMENT

Ø25 mm
Pression 0 grammes

Ref :SOFT-BRAS



Déclenchement par effleurement


Surface d'activation : Ø 15 mm
Voyant d'appel rouge
Buzzer à l'activation

Déclenchement par simple effleurement.
Pour patients avec peu de mobilité ou de force.

TIGE SOUPLE

Multidirectionnel

Ref :FLEX-BRAS

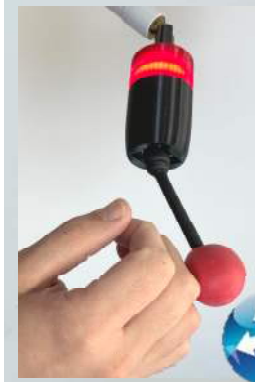


Multidirectionnel
Voyant d'appel rouge
Pas de buzzer.

Déclenchement par tirage / poussage dans toutes les directions .
Pour des patients ayant une mauvaise maitrise de leurs mouvements.
Pas d'alimentation nécessaire

*Alimentation directe par la prise d'appel malades. (SOFT ou PROX) *
(* Bloc secteur nécessaire sur certains systèmes ou versions sur fiche jack.)*


GAMME SOUFFLE & PNEUMATIQUE

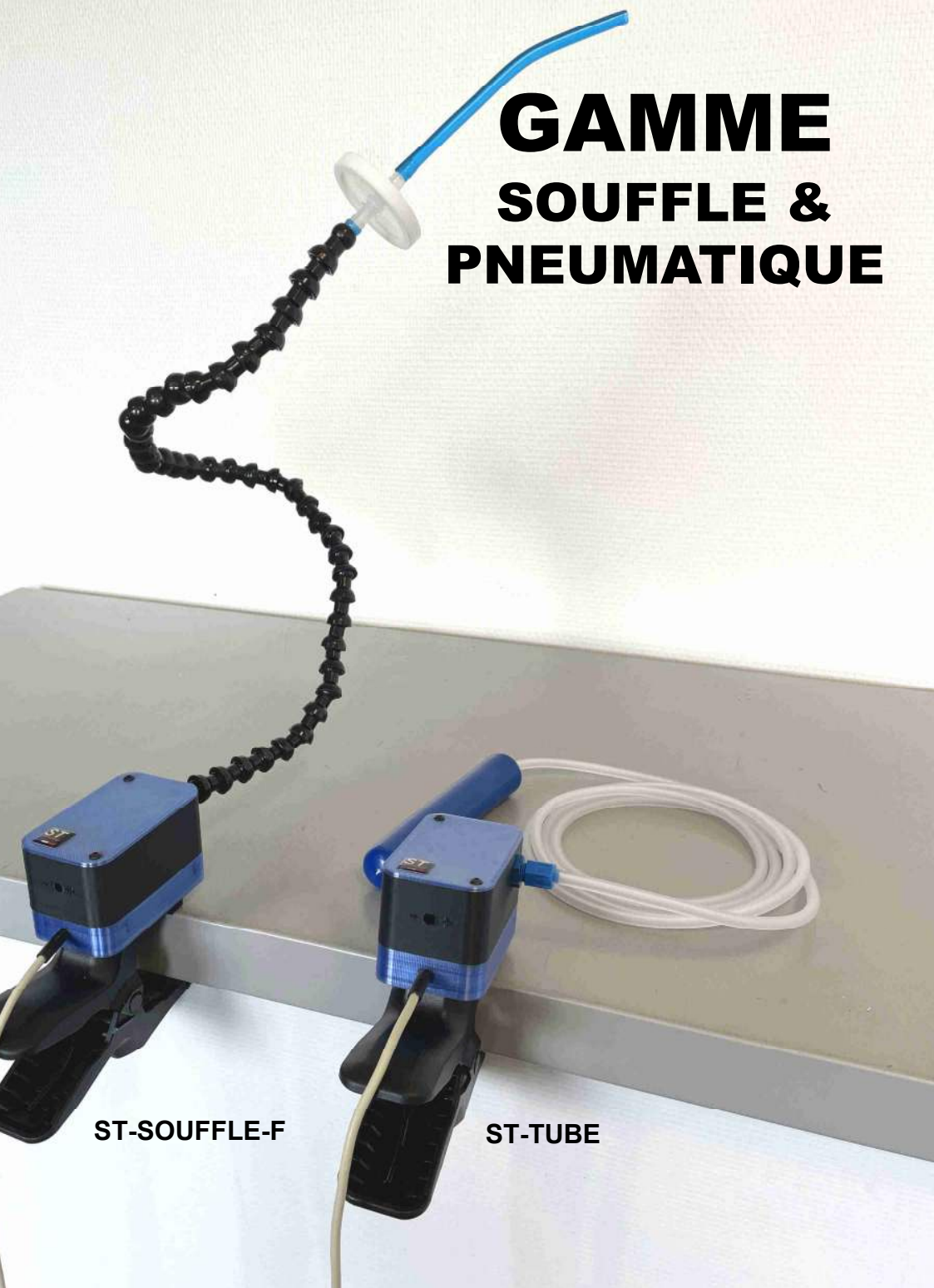

GAMME VOIX




SOUFFLE

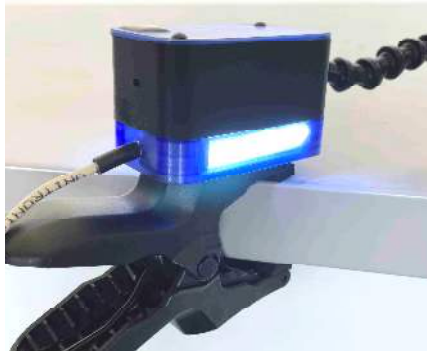

AU SOUFFLE

Ultrasensible
Pression réglable

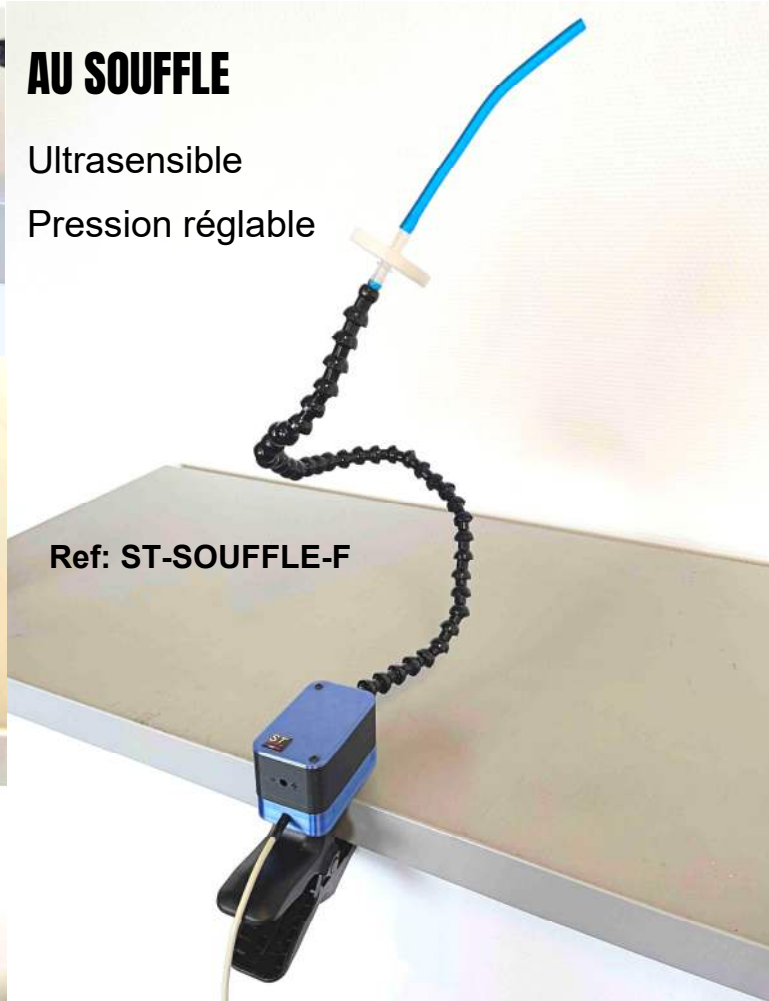

Ref: ST-SOUFFLE-F

Déclenchement : Au souffle (même faible)
Réglage pression: Très fin par vis de réglage
Contact : NO ou NF
Flexible: 60 cm
Paille : 15 cm déformable
Voyant d'appel : Oui (sur la base) *(Sauf version jack ou radio)

Également disponible en version sans fil (ST-SOUFFLE-R).

Consommables

Ref: ST-FILTRE-5



Lot de consommables pour ST-SOUFFLE :

- 15 embouts buccaux
- 5 filtres bactérien

Préconisations pour le changement des consommables :

Filtre bactérien (1x/mois)
Embout buccal (2x/mois)

APPEL PNEUMATIQUE A PRESSION REGLABLE



POIRE SOUPLE
Pression réglable

Poire Longueur: 140mm
Ø 25mm

Ref: ST-TUBE

Utilisation :

- Dans la main.
- Entre les jambes
- Sous les aisselles
- Posé sur le lit.
- Dans le bain.
- Tré polyvalent

Caractéristiques communes :

Déclenchement : **Pression, torsion, déformation ...**

Réglage pression: **Très fin par vis de réglage**
20 grammes à 1000 grammes

Contact : NO ou NF

Longueur tube : 200 cm à raccourcir si besoin

Voyant d'appel : Sur la base *

*(Sauf version jack ou radio)

Également disponibles en version sans fil.



SOUFFLET
Pression réglable

Soufflet Ø 90mm

Ref: ST-SOUFFLET

Utilisation :

- Posé sur le lit
- Au pied
- Coup de poing
- ...

APPEL A LA VOIX

VOIX
Déclenchement à la voix

Ref: ST-VOX



Capteur de son
(Positionner près de la personne)



Contrôleur



Déclenche l'appel via le système
appel malade

**Déclenchement uniquement si trois conditions sont remplies:
Pour éviter les déclenchements non voulus.**


- Fréquence du son (la voix du patient)
- Durée minimale du son (par pas de 1 secondes)
- Volume minimal du son (De très faible à fort)

Alarme à l'arrachement des cordons

Retour sonore à l'appel

Paramétrage facile sans logiciel.

- ◆ 3 boutons d'apprentissage : Volume, durée, tonalité & tolérance
- ◆ La couleur du voyant indique la valeur

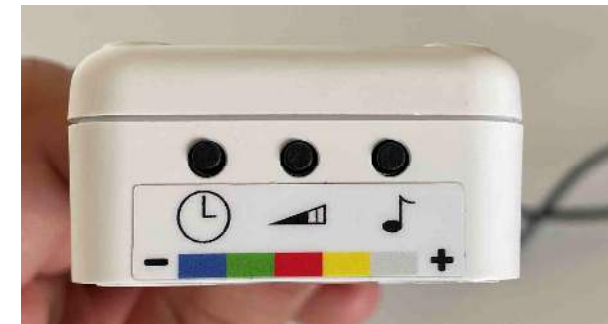


CONTACTEURS SPÉCIAUX

EXCLUSIF ST-HANDICAP

ST-SOFT-1F


ST-SOFT-MAN

ST-WOBBLE-SWITCH

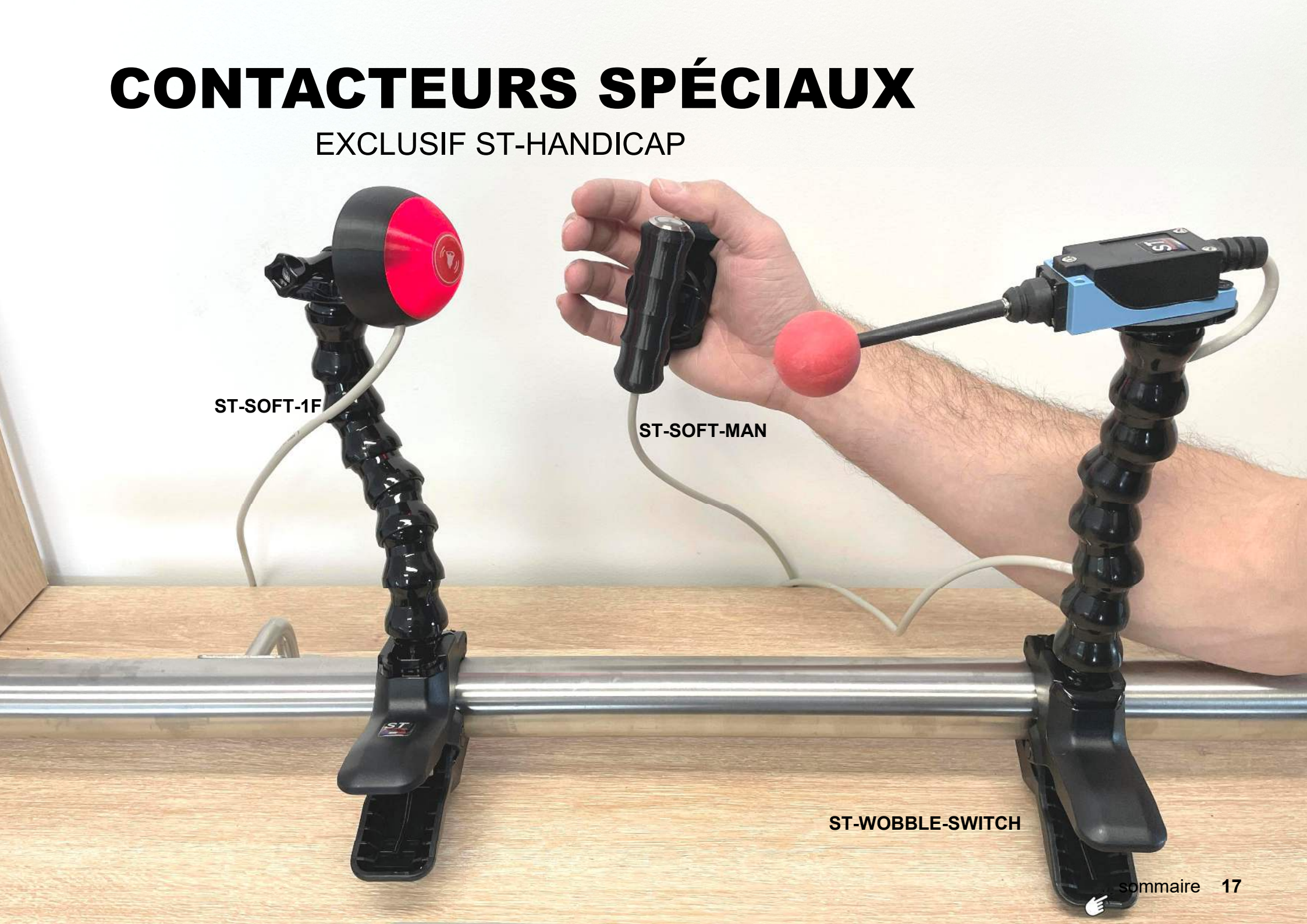

LE KIT CONTACTEUR A EFFLEUREMENT MULTI SUPPORT

Ref: ST-SOFT-1F

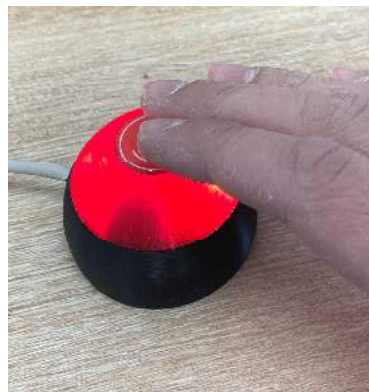

EFFLEUREMENT

Ø25 mm
Activation 0 grammes
Voyant + Buzzer

NOUVEAU

ST-SOFT-1F

(1 Contacteur, 3 modes d'utilisations)

Contacteur ultra sensible & ultra polyvalent :

3 modes de positionnements :

- Contacteur seul à poser (*chevet, lit ...*)
- Contacteur sur pince étau (*Barrière, fauteuil ...*)
- Contacteur sur flexible (*Barrière, fauteuil ...*)

Retour sonore par buzzer. (*Pour les mal-voyants*)

Voyant d'appel intégré. (*Pour tranquilliser le patient*)

Flexible 20 cm

Version ST-SOFT-3F. (*Sur demande*)

(Même principe, mêmes supports, design différent)

3 Touches à effleurement.


- 1 bouton d'appel
- 2 commandes lumières

CONTACTEURS SPÉCIAUX

TIGE SOUPLE

Multidirectionnel

Ref: ST-WOBBLE-SWITCH

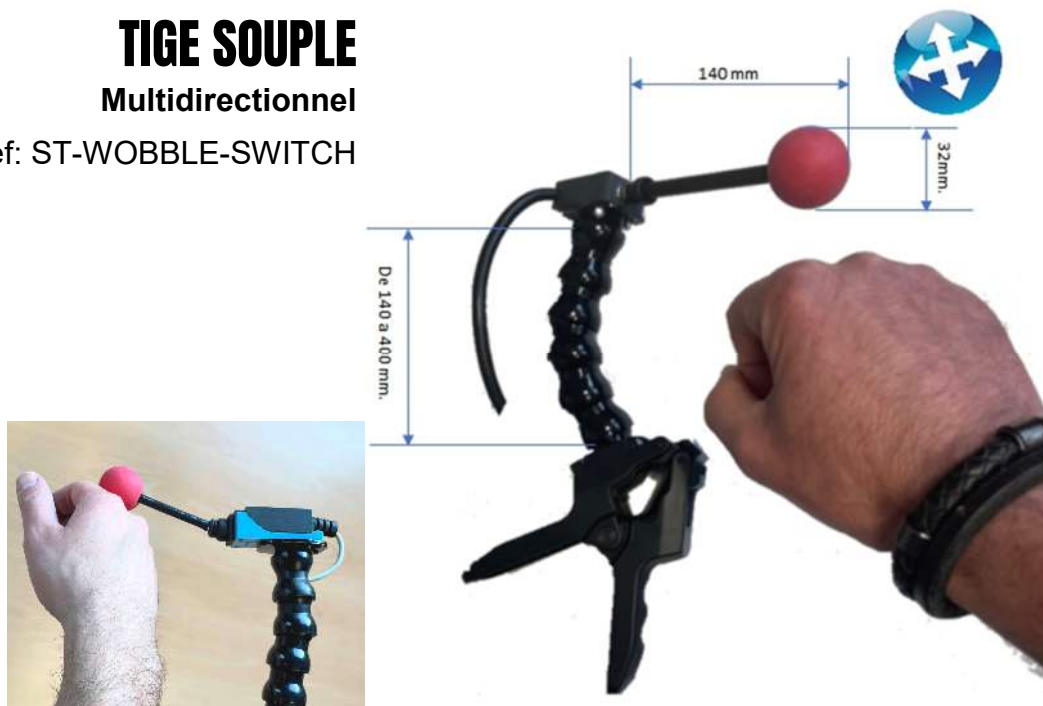

**Destiné aux personnes contrôlant mal leurs mouvements
Déclenchement dans toutes les directions!**
(Tirage, poussage, torsion...)

- Fixation sur la barrière du lit (pince robuste)
- Déclenchement dans toutes les directions.
- Boule souple (pas de risque de blessure)
- Course de déclenchement +/- 25 mm
- Force +/- 10 grammes.
- Col de cygne articulé 20 cm.

Existe en version radio (ST-WOBBLE-SWITCH-R)

POIRE A EFFLEUREMENT

sur sangle velcro

Ref: ST-SOFT-STRAP



**Contacteurs au doigt sans AUCUNE FORCE !
Déclenchement uniquement au contact de la peau !
Voyant d'activation.**

- Avec strap velcro repositionnable
- Base rotative 360° avec verrouillage
- Utilisation sur n'importe quel doigt
- Alimentation via la fiche appel malade ou bloc secteur si besoin.
- Voyant rouge à l'activation





CONTACTEURS CLASSIQUES

Contacteurs simples ST-HANDICAP

CONTACTEURS CLASSIQUES



ULTRA SENSIBLE

60x30mm
25 grammes

NOUVEAU



Ref: **ST-MICRO-LED**

Force d'activation : **156 grammes**
Fiche : Au choix
Cordon : 1.8 m
Type de contact : **NO & NF**
Voyant d'appel: **Oui***
Compatible Multi systèmes : **Oui**



CLASSIQUE

Ø32 mm
100 grammes

Ref: ST-CONTACT-1

Force d'activation : **100 grammes**
Fiche : Jack 3.5 mm
Cordon : 1.8 m
Type de contact : **NO uniquement**
Voyant d'appel: **Non**
Compatible Multi systèmes : **Non ***



POLYVALENT

Ø65 mm
150 grammes

Ref: ST-CONTACT-2

Force d'activation : **150 grammes**
Fiche : Au choix
Cordon : 1.8 m
Type de contact : **NO & NF**
Voyant d'appel: **Oui***
Compatible Multi systèmes : **Oui**

RAPPORT QUALITÉ / PRIX !



Large surface d'appui /

Grand format

Ref: ST-CONTACT-3

Force d'activation : **156 grammes**
Fiche : Au choix
Cordon : 1.8 m
Type de contact : **NO & NF**
Voyant d'appel: **Oui***
Compatible Multi systèmes : **Oui**

CONTACTEURS CLASSIQUES



POLYVALENT SUR PINCE

Ø65 mm
150 grammes

Force d'activation : **150 grammes**
Diamètre contact : 65 mm
Type de contact : NO ou NF

- Pince robuste sur barrière de lit
- Voyant intégré
- Existe en version radio

Ref: ST-CONTACT-CLAMP



COUP DE POING / CHAMPIGNON

94 mm
400 grammes

Ref: ST-BUMPER

Force d'activation : **400 grammes**
Diamètre bumper : 94 mm
Dimensions totales : 85x85x101 mm
Fiche : Jack 3.5 mm
Type de contact : Contact NO ou NF

- Existe en version radio

TOUCHER DOUX

Déhoussable
Lavable
Ø 94 mm
100 grammes

Ref: ST-COUSSIN

Force d'activation : **100 grammes**
Diamètre contact : 80 mm
Fiche : Jack 3.5 mm
Longueur : 1.5 m
Type de contact : **Contact NO uniquement***

- Existe en version radio
- Déhoussable / lavable à 60°
- Base velcro / épingle à nourrisse

**Pas de version NF ni de cordon appel malade
(utiliser un prolongateur pour connecter à l'appel malade)*





ST-CONV

ACCESSOIRES & COMPLÉMENTS

PROLONGATEUR

Fiche jack 3.5mm
vers système appel malade

Voir page 6



INVERSEUR DE CONTACT NO/NF

Ref: ST-CONV

Inverseur NO/NF sur prolongateur ou
intégré à un manipulateur :

Permet d'utiliser un contacteur NO sur un système NF



EMETTEUR RADIO

Avec entrée jack 3.5mm pour contact

Ref: ST-TX1

Convertit tout contacteur filaire en radio

Entrée jack 3.5mm pour contacteur handicap ou
jack 6.35mm pour poire d'appel.
Pile CR2032

Compatible avec tous les récepteurs de la
gamme radio



BOUCHON SHUNT

Fiche jack 3.5mm

Permet de désactiver l'alarme arrachement en absence d'un
contacteur NF.





ST-26

GAMME SANS FIL ST-RADIO

Composez votre solution sans fil sur mesure !



KIT RADIO prêt à l'emploi !

Récepteur radio intégré à un manipulateur Ou sur fiche appel malades.

- * Sans travaux ni programmation.
- * Facile à déplacer de chambre en chambre.
- * Très économique
- * Se connecte sur la prise appel malades existante.
- * Livré prêt à l'emploi. (Plug & Play).
- * Nombre de kits par site illimité.

- Émetteurs / contacteurs à choisir dans la gamme.
- Permet l'association de 1 à 32 émetteurs radio


Portée 30 à 50 mètres autour de la chambre.
Utilisez autant de kits que vous souhaitez.
(Pas de risque d'interférences.)

*Alimentation directe par le système D'appel malades.**

**Pour certains systèmes d'appel, ou pour les versions sur prise jack, un bloc secteur peut potentiellement être nécessaire.*



Kit radio sur manipulateur universel

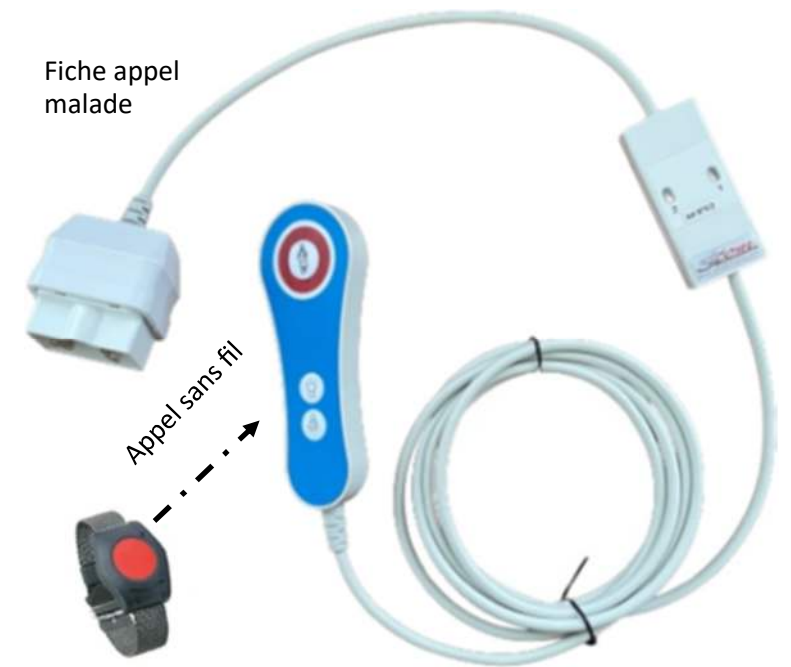


Fiche appel malade

Appel sans fil

A brancher sur la prise manipulateur

Kit radio sur cordon appel malade

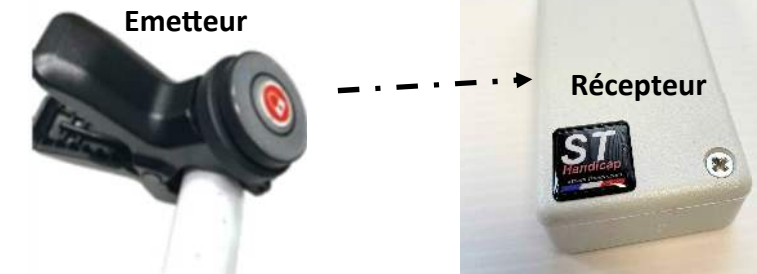

Émetteur

Récepteur

EMETTEURS

Médaille radio BRACELET & PENDENTIF

Ref: ST26 / ST27

Pile interchangeable : **1x CR2032**
Autonomie moyenne : **> 1 An**

Voyant d'appel & d'état de pile
Tour de cou avec sécurité anti-strangulation (ST27)

*Pour changer la pile des médailles, une clé (non fourni) est nécessaire :
ST-CLE-MED*



ST-26



ST-27

POUSSOIR APPEL RADIO

Ref: ST-BP-1F-F

Symbole infirmière **Appel**
Symbole infirmière **Acquit**
Format interrupteur
Piles: 2x CR2032

POUSSOIR A EFFLEUREMENT (sensitif)

Ref: ST-BP-1F-R

Touche à **Effleurement**
Symbole infirmière **Appel uniquement**
Format interrupteur
Piles: 2x CR2032



ST-BP-1F-F



ST-BP-1F-R

Tirette & entrée jack RADIO

Ref: ST-TIR-R

Touche d'appel en façade
Tirette avec sécurité (se déboîte en cas de tirage trop fort)
Entrée jack 6,35mm pour poire d'appel
Dimensions: **45 x 45 mm**
Pile : **1x CR2032**



EMETTEURS HANDICAP

NOUVEAU

Ref: ST-SOFT-1R

KIT RADIO A EFFLEUREMENT

3 modes d'utilisations

- Déclenchement : Effleurement (0 force)
Fixation multiple :
* Contacteur posé à plat.
* Sur pince étau
* Sur flexible 20 cm avec



Bumper RADIO

Ref: ST-TX-6



Bumper RADIO SUR PINCE

Ref: ST-CLAMP-RADIO



Bumper RADIO sur bras

Col de cygne 60cm pour fauteuil et lit

Ref: ST-TX-6-BRAS



CARACTERISTIQUES COMMUNES :

- Activation : 250 grammes
- Diamètre : 55 mm
- Voyant d'appel : Oui
- Voyant pile : Oui
- Poids : 50 grammes
- Pile : 1x CR2032

EMETTEURS HANDICAP



CONTACTEUR RADIO

A TIGE SOUPLE

REF: ST-COUSSIN-R

Destiné aux personnes contrôlant mal leurs mouvements

Déclenchement dans toutes les directions!

(Tirage, poussage, torsion...)

Tige souple évitant la casse et les blessures

CONTACTEUR COUSSIN RADIO

A TOUCHER DOUX

REF : ST-COUSSIN-R

Force d'activation : 100 grammes

Déhoussable, lavable en machine.


Ø 80 mm

Base velcro pour fixation sur draps



CONTACTEUR AU SOUFFLE RADIO

REF : ST-SOUFFLE-R

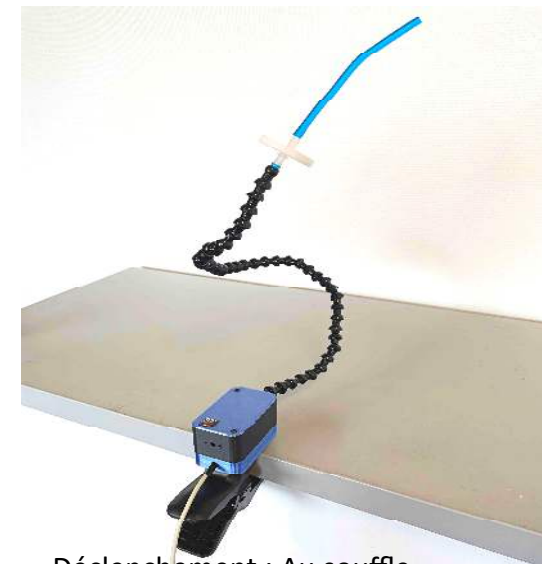

Déclenchement : Au souffle

Réglage pression: Très fin

Flexible: 60 cm

Embout buccal déformable : 15 cm

Filtre bactérien

CONTACTEUR POUR PATIENTS

SOUS CONTENSION

REF : ST-TX-6-BELT

(Détails page 38)

RÉCEPTEURS

Récepteur RADIO

Seul,
Sur fiche appel malade
Ou sur manipulateur

Ref: STL07

- Récepteur radio miniature
- Dédié APPEL MALADE !
- Alimentation : 12 à 24V DC via fiche appel malades ou alim. externe
- Livré sans cordon (bornier à vis)
- Permet de piloter l'appel malade par un émetteur radio de la gamme

- ⇒ Livraison sur fiche appel malade (se connecte à la place du manipulateur).
- ⇒ Livraison sur manipulateur (permet en plus de conserver les fonctions du manipulateur).

Sur fiche appel malade



Sur manipulateur



Récepteur BIP

Ref: ST-PAGER-V2

- Bipeur de poche compact
- Affiche un message programmable pour chaque émetteur (ex: CH206, Appel M. Dupont etc...)
- Émetteurs mémorisés : jusqu'à 64
- Sonore et vibrant
- Charge et programmation via câble USB
- Logiciel de programmation fourni



Récepteur radio 2 ou 4 contacts

Ref: ST-RAIL2 / ST-RAIL4

- Pour rail DIN
- Alimentation : 220V AC
- Contacts de puissance
- Programmable NO/NF
- Programmable en impulsion, temporisé, ou ON/OFF



RÉCEPTEURS

Avertisseur Sonore & Lumineux

Version temporisé

Ref: ST-GIG-SON

- Signal sonore 80 à 90 dB réglable
- Signal lumineux type « FLASH » paramétrable
- Durée réglable : 1sec à 1min
- Alimentation via prise de courant (220V AC)
(Pour tranquilliser le patient par exemple)



Avertisseur Sonore & Lumineux

Version à acquitter

Ref: ST-GIG-SON-ACK

Caractéristiques identique au ST-GIG-SON, mais le flash et le signal sonore ne s'arrêtent qu'à l'appui du bouton intégré. (en salle de soins ou pour l'aidant)

RÉPÉTEUR RADIO

Ref: ST-RX/TX-GIG

- Permet de doubler la portée radio
- A brancher sur prise de courant (220V AC)
- Cascadable (jusqu'à 3).



Existe aussi en version à encastrer : ST-RX-TX-ENC



Jusqu'à 3 répéteurs en cascade pour une portée jusqu'à 150 mètres:



+/- 50m



+/- 50m



+/- 50m



AUTRES PRODUITS : D'autres types d'émetteurs ou récepteurs sont disponibles à l'achat sur demande, nous consulter.

VALISE DE SECOURS

La valise de secours **ST HANDICAP** permet de déployer une solution appel infirmière d'appoint provisoire, à court ou moyen termes, soit dans l'attente d'un remplacement d'un système, ou bien en cas de panne.

Elles sont adaptables sur mesure en fonction de vos besoins, chaque récepteur permet de recevoir jusqu'à 64 médaillons différenciés via message programmable pour chaque médaillon (ex: CH 108, M. Dupont etc...).

Le répéteur inclus permet de doubler la portée des émetteurs qui est de 50m en champ libre.

Le logiciel inclus permet de programmer les messages à votre convenance sur un PC de manière simple et rapide.

Les chargeurs et accessoires nécessaires sont inclus.

Ref: ST-VAL-20

- 20 médaillons (ST26 ou ST27 au choix)
- 2 récepteurs ST-PAGER V2
- 1 répéteur ST-RX-TX-GIG

Ref: ST-VAL-30

- 30 médaillons (ST26 ou ST27 au choix)
- 3 récepteurs ST-PAGER V2
- 1 répéteur ST-RX-TX-GIG





GAMME SANS FIL INFRAROUGE

Composez votre solution sans fil sur mesure !

INFRAROUGE

ST-MAN-IR

Manipulateur universel pilotable en infrarouge via téléthèse

Permet de piloter toutes les fonctions du manipulateur également depuis la téléthèse du patient !

Intégration d'un récepteur infrarouge sur notre manipulateur compatible.

Utilisation:

- Enregistrez les codes IR depuis notre télécommande d'apprentissage dans la téléthèse du patient. *
- Branchez et utilisez sans aucun travaux.

* Une télécommande d'apprentissage est nécessaire si vous n'en possédez pas.



ST-IR-RX-TX

Convertisseur infrarouge vers radio

Permet de piloter tous les récepteurs de la gamme ST-RADIO depuis votre téléthèse.

Le convertisseur reçoit les signaux IR de votre téléthèse et les retransmet en signal radio.

Bien moins onéreux que les récepteurs infrarouge, ce produit vous permet de réaliser sans câblages, des systèmes de domotique à moindre coût et déplaçables de chambre en chambre.

Il peut donc aussi piloter un kit radio.

Applications classiques:

- Ouverture de portes.
- Lumières.
- Appel malades
- Volets.
- Etc...

Alimentation par prise USB

- Branchez simplement sur un port USB
- Reçoit les signaux infrarouge (IR) (+/- 10m)
- Retransmet en radio (+/- 50m)



INFRAROUGE

Télécommande d'apprentissage

Ref: ST-IR-PROG

Permet d'enregistrer les codes infrarouge dans votre téléthèse (1 seule télécommande par site)

- Version 1 : Pour manipulateur ST-MAN-IR ou ST-IR-CONTROLBOX
- Version 2 : Pour ST-IR-RX-TX ou ST-IR-4-SWITCH



Version 1



Version 2

Récepteur infrarouge 4 sorties contact

Ref: ST-IR-4 SWITCH

4 prises jack 3.5mm mono pour sortie contact (3 sorties NO, 1 sortie NO/NF)

- LED d'activation pour chaque sortie.
- Maximum 4 modules par chambre (16 contact)
- Contact maintenu pendant toute la durée du signal infrarouge
- Dimensions : 8 x 6 x 1 cm
- Alimentation : 5V (USB A)



Récepteur infrarouge 10 sorties contact

Ref: ST-IR-CONTROL BOX

10 sorties programmables (max 32V AC/DC, max. 500 mA)

- Impulsion de 0.5 à 127 secondes
- ON/OFF à chaque commande.
- Alimentation de 7 à 32 V DC
- Dimensions: 102 x 54 x 30mm
- Capteur infrarouge intégré
- Raccordement sur fils libres



Chute, Errance nocturne & Crises d'épilepsie EMFIT

Détection de sortie du lit et de chute

Ref: ST-SAFE-BED

- Tapis sous matelas
- Détection des signes vitaux de la personne
- Lors de la sortie de lit, déclenche une alarme immédiate ou temporisée jusqu'à plusieurs minutes.
- **Incompatible avec matelas anti-escarres**
- Alimentation 2 piles AA ou Bloc secteur fourni
- Sortie contact sec ou option radio (Ci-dessous)

Détection de crise d'épilepsie

Ref: ST-EPI-CARE

*caractéristiques identiques au SAFE BED
(fonction de sortie de lit identique)*

Il intègre en plus la détection de crises d'épilepsie convulsives.

Emetteur radio pour tapis EMFIT

Ref: ST-TX-1

- A plugger sur contrôleur SAFE BED ou EPI-CARE
 - Permet de renvoyer l'appel sur un récepteur de la gamme ST-RADIO*
- *voir nos récepteurs radio à connecter sur appel malade*




DÉTECTION DE CHUTES ET D'ERRANCES

Ref: ST-VARIO

Détection et prévention intelligente de chute et d'errance nocturne sans fil

Détection dans le sens du lit vers la sortie, et pas l'inverse !
Possibilité de mettre en pause le déclenchement de manière provisoire
(soins, visites etc...)

Fonctionnement sans fil sur système appel malade
(via gamme ST-RADIO).

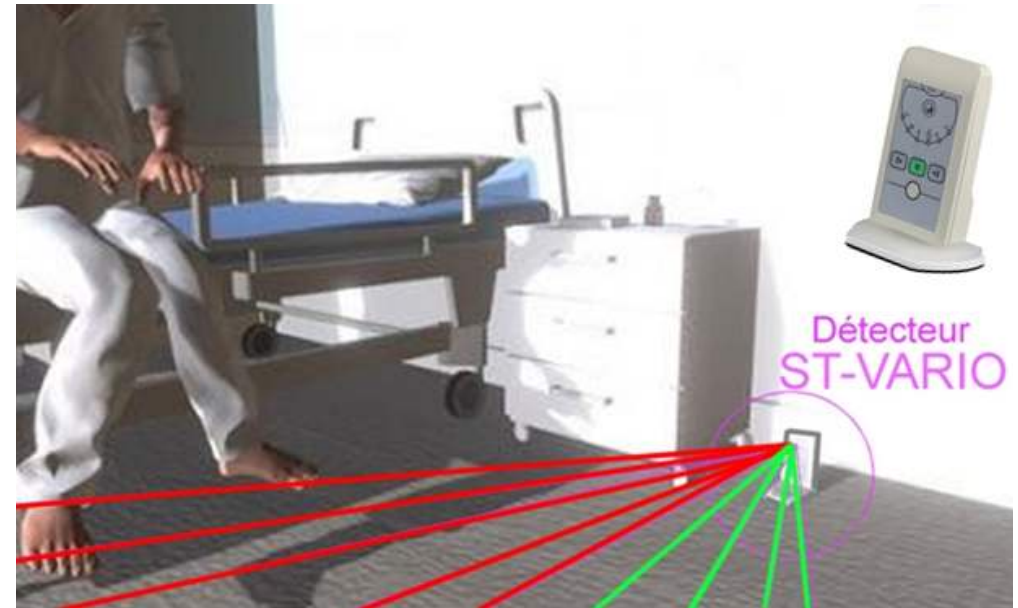

DÉTECTION DE SORTIE DE CHAMBRE

Ref: ST-CP-R

NOUVEAU

Capteur de porte radio (sans travaux).

Déclenche l'appel malade à l'ouverture de la porte ! (avec un récepteur gamme radio connecté à l'appel malade)

Désactivable via un bouton (soins infirmier, autorisation en journée etc...)



SOLUTIONS PSYCHIATRIE

Spécial pour patient sous contention (Psychiatrie)

Bouton radio verrouillable sur sangle

Ref: ST-TX-6-BELT

Se fixe sur une sangle de contention accessible au patient.

Fixation très robuste et impossible à enlever d'une main

Ne glisse pas sur la sangle

Ø Contacteur 55 mm

Pile CR2032 incluse

NOUVEAU



Contacteur au pouce

Sangle velcro tour de doigt

Ref: ST-FINGER

Force d'activation : **75 grammes**

Fiche : **Jack 3.5 mm**

Longueur : **1.5 m**

Type de contact : Fiche jack 3.5mm **NO uniquement.**

Pour utiliser ce contacteur sur un système en NF, un inverseur de contact est nécessaire, en plus du prolongateur pour votre système.

